

Unigloves Bohrerbad Plus

Instrumentendesinfektion

Gebrauchsfertiges Spezialpräparat zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von rotierenden, medizinischen Instrumenten wie Bohrer, Fräser, Diamantschleifer. Alkoholfrei. Geeignet für (zahn)ärztliche Praxen, Kliniken sowie Fußpflegestudios.

Zusammensetzung:

In 100g sind enthalten:

- 0,396g Didecyldimethylammoniumchlorid
- 0,2475g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- Enthält <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

Artikelnummer und Größe:

97-601 | 2 Liter

97-605 | 5 Liter

97-610 | 10 Liter



Vorteile

- Hervorragende Materialverträglichkeit auf Grund von moderatem pH-Wert
- Frei von Aldehyden, Alkalien und Alkoholen
- Mit effektivem Korrosionsschutz
- Nicht eiweißfixierend
- VAH-zertifiziert
- IHO gelistet
- Sehr gute Reinigungsleistung

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	Konzentration in %	1 Min.	5 Min.	30 Min.
Bakterien inkl. MRSA	EN 13727, EN 14561, VAH	hoch	unverdünnt		3	
Candida albicans	EN 13624, EN 14562, VAH	hoch	unverdünnt		3	
Mykobakterien (M. terrae und M. avium)	EN 14348, EN 14563	niedrig	unverdünnt		3	
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	RKI/DVV, EN 14476, EN 17111	hoch	unverdünnt		3	


Sonstige Hinweise

- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Anwendungshinweise

- Bohrerbad PLUS immer unverdünnt anwenden! Bei starken Verunreinigungen zuvor die für eine Tauchbadesinfektion geeigneten Medizinprodukte mechanisch reinigen und - falls möglich - in geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche zu desinfizierenden Oberflächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein.
- Das Instrumentarium nach Gebrauch sofort in die gebrauchsfertige Lösung einlegen, alle zu desinfizierenden Teile müssen vollständig bedeckt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit das Desinfektionsgut gründlich mit bevorzugt demineralisiertem Wasser abspülen und trocknen. Nicht mit anderen Desinfektionsmitteln oder Reinigern mischen, nicht für Aluminium geeignet. Je nach Verschmutzungsgrad ist die Gebrauchslösung zu erneuern (RKI-Empfehlung: Mindestens arbeitstäglich). Die Gebrauchslösung kann verdünnt mit Wasser über das Abwasser entsorgt werden. Die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller sind zu beachten. Kritische Medizinprodukte sind abschließend zu sterilisieren. Nur für professionelle Anwender. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe und Augenschutz zu tragen.
- Sehr gute Materialverträglichkeit mit allen gängigen Instrumentenmaterialien (z.B. Edelstähle, Stähle, Gummi, diamantbelegte Bohrer, diverse Kunststoffe wie PMMA, POM, EDPM). Beim Einsatz neuer Materialien ist vorab die Verträglichkeit zu überprüfen.
- Dosiermengen und Einwirkzeiten sollten genau eingehalten und nicht unterschritten werden. Überdosierungen sollten aus Umweltschutz- und Materialverträglichkeitsgründen ebenfalls vermieden werden.

pH-Wert: 9,8

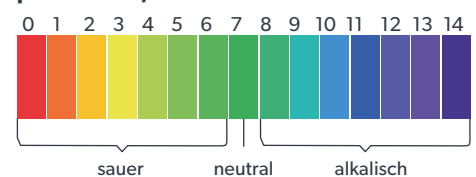

UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

